


ベビーセンサ発信器

ボタンと接続

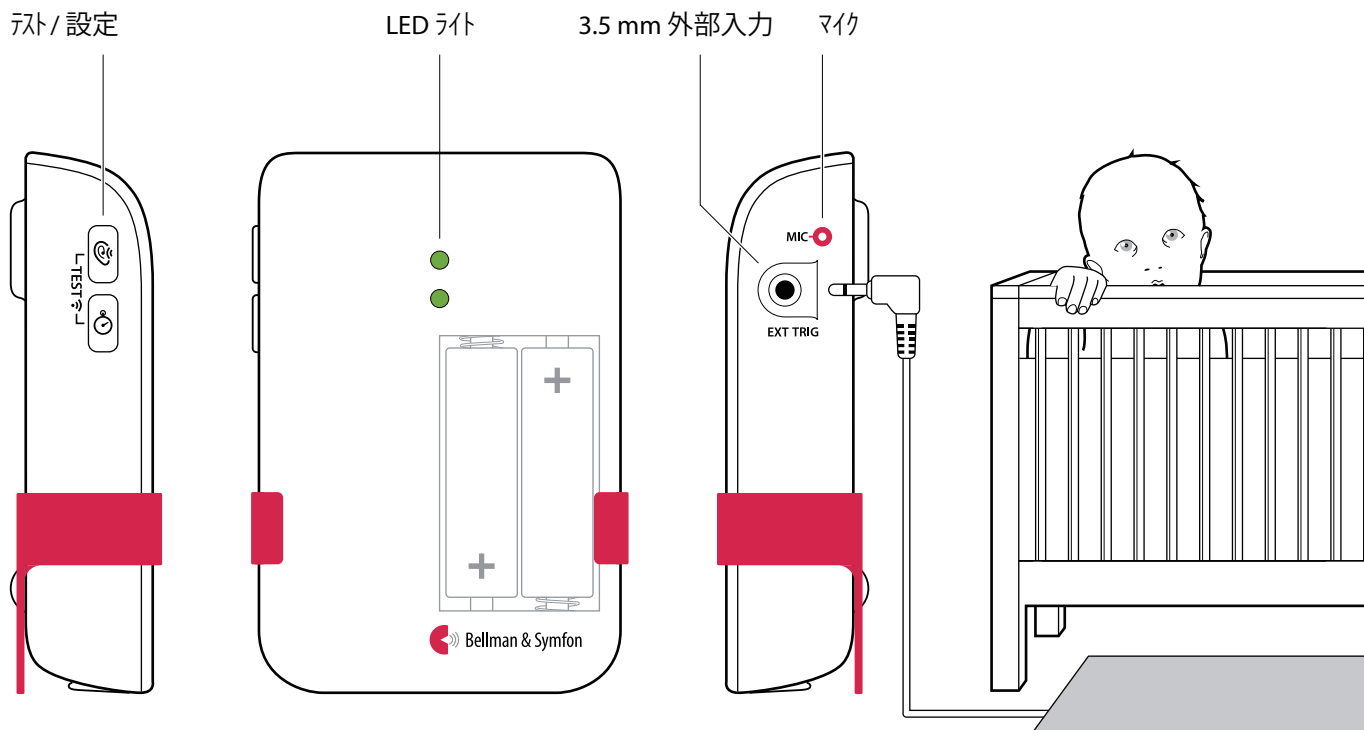

ベビーセンサがお子様の手の届かないところにあることを常に確認してください。
ベビーセンサをお子様のベビーベッドやベビーサークルの中に置かないでください。

BE9026 マットセンサ
お子様がベッドから出た時に警告します。

技術仕様

【同梱品】

- BE1491 ベビーセンサ
- 1.5 V AA アルカリ電池 × 2 (モニタ用)
- 卓上スタンド (取付済み)
- ねじと壁用プラグ

【電源とバッテリー】

- 電源
- 1.5 V AA リチウムまたはアルカリ電池 × 2
- 消費電流
- 動作時: 70 mA 未満
- 待機時: 400 μ A 未満
- 動作時間
- アルカリ電池: 約6ヶ月
- リチウム電池: 約1年

【寸法と重量】

- 高さ: 100 mm (4.0")
- 幅: 65 mm (2.6")
- 奥行: 27 mm (1.1")
- 重量: 118 g (電池含む)

【動作トリガー】

- 本体内蔵マイクおよびテストボタン
- オプション: マットセンサ (BE9026)

【設定項目】

- 感度: 65 dB, 75 dB, 85 dB
- 遅延: 30 秒, 10 秒, 1 秒

【アクセサリ】

- BE9026 マットセンサ

【環境条件】

- 屋内使用のみ
- 動作温度: 0 °C ~ 35 °C (32 °F ~ 95 °F)
- 相対湿度: 15 % ~ 90 % (結露なきこと)

【周波数と通信距離】

- 周波数: 315 MHz, 433.92 MHz, または 868.3 MHz (地域により異なる)
- 通信距離 (目安)
- 315 MHz: 最大 50 m (164 ft)
- 433 MHz: 30 ~ 80 m (98 ~ 260 ft)
- 868 MHz: 50 ~ 250 m (55 ~ 273 yd)
- ※建物の構造や送受信器の組み合わせにより変動

ベビーセンサ発信器


【設置手順】

(1) バッテリープルタブを抜いてユニットを起動します。

- テストボタンを両方3秒間押し続けると、電源のオン／オフが可能です。

(2) ベッドサイドテーブルに置か、付属のねじとプラグで壁に取り付けます。

- 推奨設置距離: 0.5 ~ 2 m (常にお子様の手の届かない場所に設置してください)

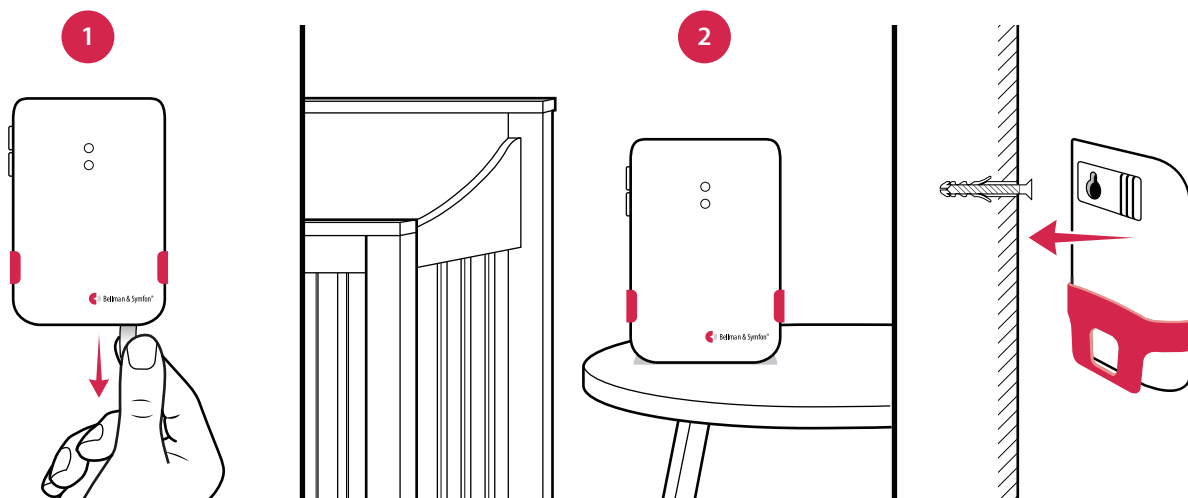

【テストボタン使用による動作確認】

(1) ベビーモニターのテストボタンを両方同時に押します。

- 上部LEDが緑色に点灯し、無線信号送信中を示します。

(2) 受信器のオレンジ色Visit LEDが点灯し、受信を示します。

- 受信器の種類に応じて、音、点滅、振動のいずれかで通知します。

【音声による動作確認】


(1) ベビーモニターのそばで音を立てます。

- 上部LEDが緑色に点灯し、音を検出したことを示します。

(2) 受信器のオレンジ色Visit LEDが点灯し、受信を示します。

- 受信器の種類に応じて、音、点滅、振動のいずれかで通知します。

注: 電波パターンを変更している場合は、次ページ以降の表に従って動作します。

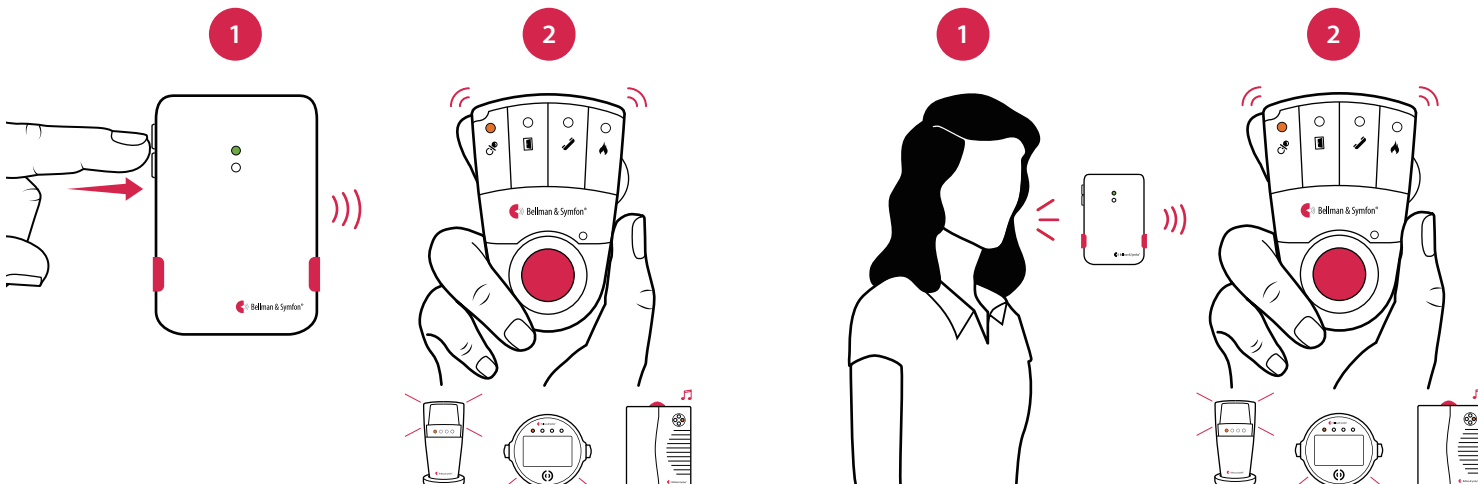

ベビーセンサ発信器

【感度・遅延設定の調整】

感度／遅延ボタン（左側）を押すごとにLED色で現在設定を表示。再度押して調整。

- 赤ちゃんの声で反応しない場合：感度を上げる
- 反応が過敏な場合：感度を下げる
- 反応が早すぎ／遅すぎる場合：遅延を調整

感度設定




- 65 dB 赤
- 75 dB 橙
- 85 dB 緑

遅延設定



- 30 s 赤
- 10 s 橙
- 1 s 緑

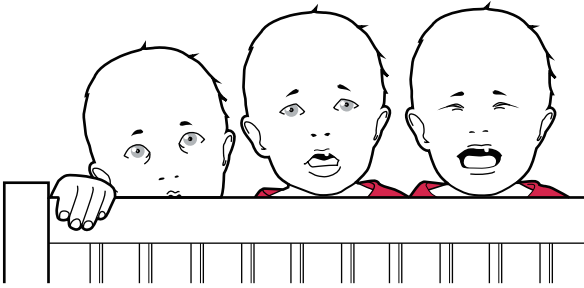

【デフォルト電波パターン】

ベビーモニターが音声またはマットセンサで起動されたときの動作：

- (1)本体LEDが緑色に点灯し、信号送信中を示す。
- (2)受信器のVisit LEDがオレンジ色に点灯し、信号パターン（一定のリズム）で音、点滅、振動を開始。

Baby monitor

Source	LED
■ Baby voice	Green, top
■ Contact mat	Green, bottom

Receiver signal pattern

LED	Sound	Vibration	Flash
Orange light	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes
Green light	1×door chime, low	Slow ■■■■	Yes

【電波パターンの変更】

お子様が複数いる場合、ベビーモニターごとに一意のパターンを設定可能：

- (1)卓上スタンドを外し、前面カバーを開ける。
- (2)任意の信号スイッチを上（ON）にし、他を下（OFF）にする。



Baby monitor

Switch	Source
	Baby monitor 1 Contact mat 1
	Baby monitor 2 Contact mat 2
	Baby monitor 3 Contact mat 3
	Baby monitor 4 Contact mat 4

Receiver signal pattern

LED	Sound	Vibration	Flash
Orange light	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes
Green light	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes
2×orange blinks	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes
2×green blinks	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes
3×orange blinks	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes
3×orange blinks	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes
Orange blinks	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes
Orange blinks	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes

ベビーセンサ発信器



【無線キーの変更】

他システムからの干渉を避けるにはすべてのユニットで同じキーに設定して下さい。

-変更手順

- (1)卓上スタンドを外し、前面カバーを開ける。無線キー用スイッチを任意でON (他はOFF)。
- (2)受信器のテスト／機能ボタンを緑・黄LEDが交互に点滅するまで長押しし、放す。
- (3)30秒以内にベビーモニターの両テストボタンを同時に押し、新しいキーを送信。
- (4)受信器のVisit LEDが5回点滅し、設定完了を示した後、通常モードに戻る。

注：すべてのVisitユニットを同じキーに設定してください。

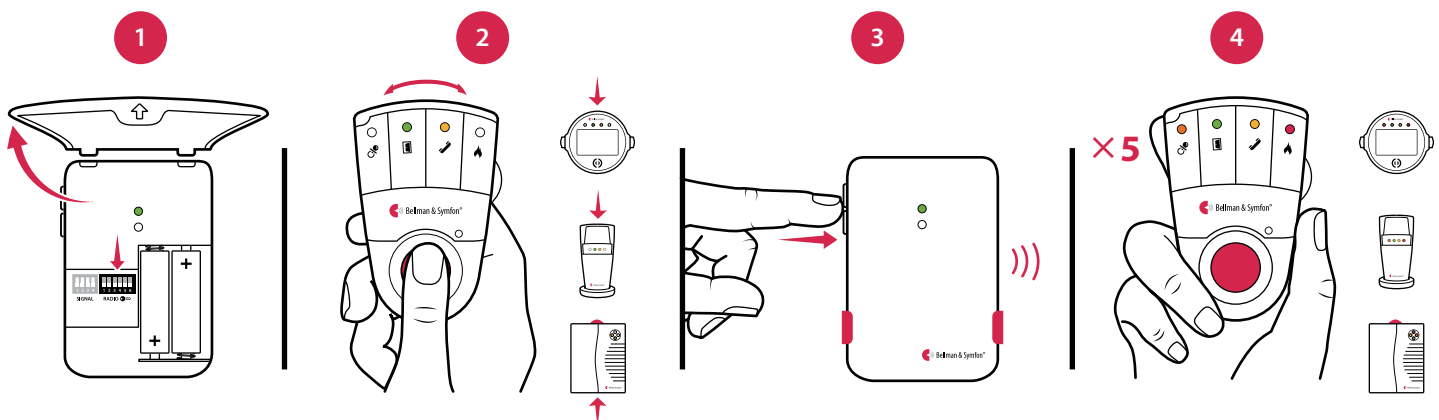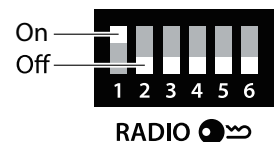

【トラブルシューティング】

状況

毎分オレンジLEDが点滅する

本体LEDが緑点灯するが受信器が反応しない

赤ちゃんの声でLEDが点灯しない

過敏すぎる反応

早すぎる反応

遅すぎる反応

受信器が不意に作動する

対処法

電池を交換してください。1.5 V AA (LR6) リチウムまたはアルカリ電池のみ使用。

- 本体および受信器の電池・接続を確認
- 受信器を本体に近づけ距離を確保
- 無線キーを確認
- 本体を赤ちゃんに近づける
- マイク感度を上げる

⚠ 常に手の届かない場所に設置

感度を下げる、または本体をベッドから遠ざける

遅延を長くする

遅延を短くする

近隣システムの干渉の可能性あり。無線キーを変更してください